

BIOJet

SUPERSONIC JET OF AIR AND WATER

DEVICE FOR SKIN REJUVENATION AND TRANSDERMAL DELIVERY

Sistema per il ringiovanimento cutaneo e veicolazione transdermica
Sistema para el rejuvenecimiento cutáneo y vehiculación transdérmica



MEDICAL-AESTHETIC LINE

www.biosgroup.eu

 bios

1. BIOJET is a multifunctional, innovative and not-invasive device for face and body exploiting the power of natural elements like air and water in synergy with some of the most effective active ingredients to be infused in depth thru a transdermal delivery.

BIOJET è un'apparecchiatura multifunzionale, innovativa e non-invasiva per viso e corpo che sfrutta la potenza di elementi naturali come aria ed acqua in sinergia con alcuni dei più efficaci principi attivi che vengono fatti penetrare l'epidermide attraverso un'infusione trans dermica.

BIOJET es un equipo multifuncional, innovativo y no-invasivo para rostro y cuerpo que aprovecha sinérgicamente la potencia de los elementos naturales como aire y agua con los más eficientes principios activos que penetran en la piel mediante infusión transdérmica.

2. BIOJET is equipped with a specially designed handpiece which is able to deliver micronized drops of both saline solution and active ingredients at a constant high pressure of 200 m/s to the skin.


BIOJET è fornito con un manipolo dal design sofisticato per emettere gocce micronizzate di soluzione salina o di principi attivi ad una alta pressione costante di 200 m/s.

BIOJET está provisto de un manipulador con diseño sofisticado que emite gotas de solución salina o principios activos con alta presión constante de 200 m/s.

3. BIOJET is even equipped with a screen and a camera with 50X magnifying lens in order to immediately show clients the results of the treatments, freezing a couple of pictures before and a couple after the treatment; this working method is an unquestionable proof of the remarkable results obtained with BIOJET.

BIOJET è dotato inoltre di un monitor e di una telecamera con una lente d'ingrandimento 50X per mostrare immediatamente ai clienti i risultati dei trattamenti, acquisendo un paio di immagini prima ed un paio di immagini dopo il trattamento; questo metodo di lavoro è una prova inconfutabile dei brillanti risultati ottenuti con BIOJET.

BIOJET además lleva una pantalla y una videocámara con lente de aumento 50X para mostrarle al cliente en el mismo momento los resultados del tratamiento, con un par de imágenes antes y después de dicho tratamiento; esta manera de trabajo es la prueba inconfundible de los maravillosos resultados conseguidos con BIOJET.

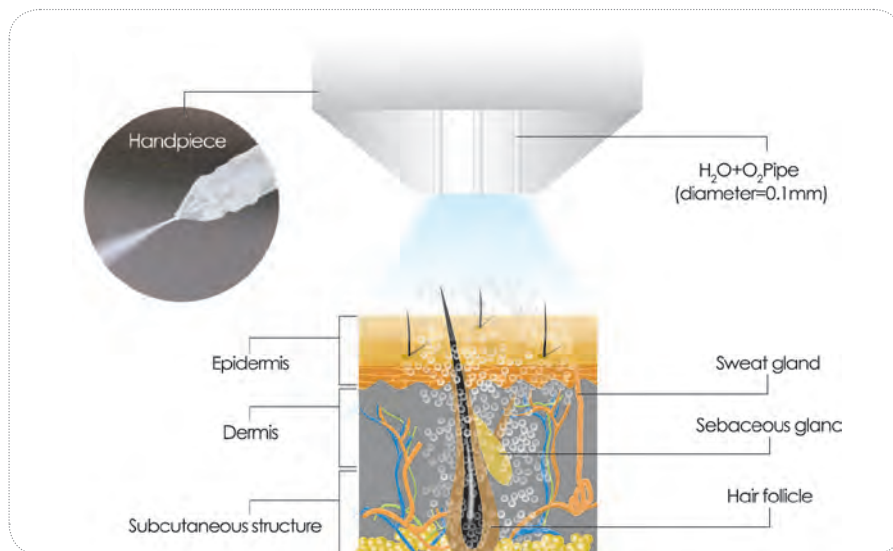

Pores skin




Red skin



Acne skin



Acne skin

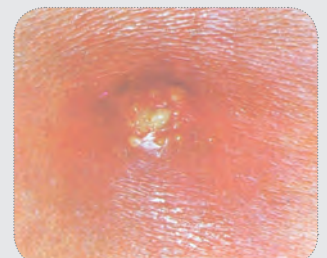

BIOJET treatment is made of 3 different phases

Il trattamento con BIOJET è fatto di 3 fasi - *El tratamiento con BIOJET se divide en 3 etapas*

- A. **BIOPeeling:** BIOJET performs a soft, hydrating, natural and effective peeling exploiting the power of water and air delivered to skin with an angle of about 45°; this is an effective and more advanced peeling method in comparison with the old, abrasive and harsh system used in the past that were also damaging and traumatizing skin, causing sometimes allergies.
- BIOpeeling: BIOJET effettua un dolce, naturale, idratante ed efficace peeling sfruttando la potenza dell'aria e dell'acqua emessa ad alta pressione e con un angolo di 45° rispetto alla pelle; questo modo di effettuare il peeling è il più innovativo ed efficace rispetto ai vecchi, tradizionali sistemi abrasivi che traumatizzavano e danneggiavano la pelle, creando talvolta allergie.
- BIOpeeling: BIOJET ejecuta un suave, natural, hidratante y efectivo peeling; aprovechando la potencia del aire y el agua emitida con alta presión y un ángulo de 45° así a la piel; este método para efectuar el peeling es el más innovativo y eficaz comparado con los anteriores, tradicionales sistemas que trauman y dañan la piel, posiblemente causando alergias.*
- B. **BIOCleansing:** this is a basic step for any skin treatment. BIOJET creates a concave hollow, induced by pressure, providing a nice lymphatic drainage massage to the area, improving blood microcirculation and the release of toxins and fluids. The procedure is carried out in combination with SKINCLEANSER to remove skin impurity and fastening the renovation process.
- BIOCleansing: questo è un passo fondamentale per ogni trattamento della pelle. BIOJET crea una depressione a livello cutaneo, causata dalla pressione, esercitando un delicato massaggio drenante linfatico sull'area del trattamento, migliorando la microcircolazione sanguigna ed il rilascio di tossine e di liquidi di ristagno. Questa procedura è supportata dall'azione di SKINCLEANSER per rimuovere le impurità della pelle e per accelerare il processo di rinnovamento.
- BIOCleansing: este es un paso fundamental para cada tratamiento de la piel. BIOJET crea una depresión en el cutis, mediante la presión, ejerciendo un delicado masaje linfático drenante en la zona del tratamiento, mejorando la microcirculación sanguínea, liberando toxinas y líquidos. Este procedimiento está probado por la acción de SKINCLEANSER para despejar las impuridades de la piel y acelerar el proceso de renovación.*
- C. **BIOInfusion:** according to the skin condition BIOJET is supplied with a complete range of products which active ingredients are delivered down to the basal layers of skin by means of a transdermal infusion. In this procedure, the handpiece is kept perpendicular to the skin in order to create microchannels where products can penetrate.
- BIOInfusion: a secondo della condizione della pelle BIOJET è fornito con una completa gamma di prodotti: i principi attivi vengono fatti penetrare fino agli strati basali della pelle attraverso un'infusione transdermica. In questa procedura il manipolo è mantenuto perpendicolare alla pelle per creare dei "micro canali" attraverso i quali il prodotto può penetrare.
- BIOinfusion: según las condiciones de la piel, BIOJET está provisto de una completa gama de productos: los principios activos penetran hasta los estratos más profundos de la piel tras una infusión transdérmica. En este procedimiento, el manipulador se mantiene perpendicular a la piel para obtener "micro canales" a través de los cuales el producto puede penetrar.*



INTENDED USES

Indicazioni - *Indicaciones*

- **Scars**
Cicatrici - Cicatrices
- **Striae**
Striae - Estrias
- **Acne**
Acne - Acne
- **Hyperpigmentation**
Iperpigmentazioni - Hiperpigmentacion
- **Wrinkles**
Rughe - Arrugas
- **Hyperkeratosis**
Cheratosi - Queratosis
- **Deep or superficial peeling**
Peeling superficiale o profondo - Peeling superficial o profundo
- **Black spot or dilated pores**
Punti neri o pori dilatati - Puntos negros o poros dilatados
- **Impure skin**
Impurità della pelle - Impurezas de la piel



TECHNICAL DATA Dati tecnici - Datos técnicos	O2 Concentration Concentrazione O2 - Concentración O2	Max 93% -0,6 MPa
	Flow Flusso - Flujo	15 lt/min
	Skin scanner Skin scanner - Scanner de la piel	50x optic ottico - óptico
	Display LCD Display LCD - Pantalla LCD	15"
	Power Consumption Potenza assorbimento - Potencia absorción	750VA
	Power Alimentazione - Alimentación	110V-230V AC±10%/-60 Hz
	Dimensions Dimensioni - Dimensiones	520x450x1220 cm (LxDxH)
	Weight Peso - Peso	43Kg

Bios S.r.l. reserves the right to make changes on the technical product data.
This document does not represent an enforceable legal contract.

*Bios S.r.l. si riserva di apportare modifiche ai dati tecnici del prodotto.
La presente brochure non ha valore contrattuale.*

